



EarBox

Mobile Test-Module für Marketing
und Prävention.



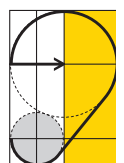

Einfach in der Bedienung. Verständlich in der Darstellung. Klar im Ergebnis: Mit der EarBox machen Sie das Hören und die möglichen Folgen einer andauernden Gehörbelastung für ihre Zielgruppen umgehend erlebbar.

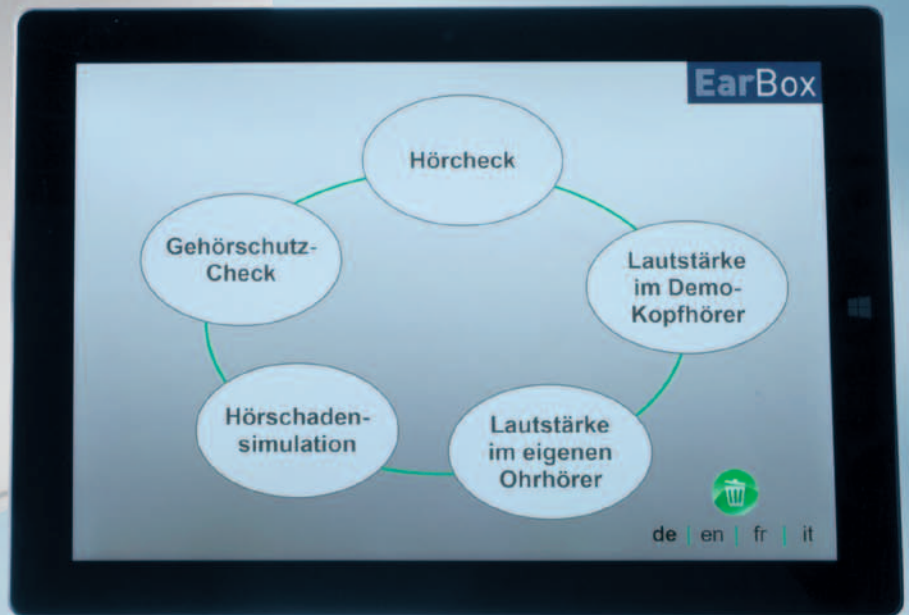

Zwei Spezialisten. Ein Ziel.

Die EarBox versteht sich als mobile Technik für den ortsunabhängigen Praxiseinsatz. Mit 5 unterschiedlichen Test- und Demonstrations-Modulen vermittelt sie eindrucksvoll, welche Auswirkungen individuelle Hörgewohnheiten auf das Gehör haben können.

Entwickelt wurde die EarBox in enger Zusammenarbeit der ciAD AudioProducts GmbH und Acousticon. Aus dem gebündelten Wissen dieser Spezialisten für Akustik und Audiorehabilitation einerseits sowie der praxisorientierten Hörakustik und audiologischen Technologie-Entwicklung andererseits, entstand eine flexibel nutzbare Technik. Diese eignet sich gleichermaßen für die audiologische Aufklärung und Prävention wie auch zum Marketing und zur Neukundengewinnung.

Mit einfachen, auch für den Laien nachvollziehbaren Darstellungen, bietet die EarBox vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine gute Basis für ein weiterführendes Beratungsgespräch.

Hören. Erleben. Verstehen. Die EarBox-Module.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Die EarBox wurde für alle Branchen und Bereiche konzipiert, in denen das Hören sowie das Erkennen oder auch Vorbeugen von Beeinträchtigungen des Gehörs eine Rolle spielt: Das können Hörakustik-Fachbetriebe ebenso sein wie Berufsgenossenschaften, Ausbildungsstätten, Arbeitsschutzbeauftragte, HNO-Ärzte oder Krankenkassen ...

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die EarBox für die Beratung und präventive Aufklärung Ihres Stammklientels, für Informations- und Marketing-Aktionen im öffentlichen Raum oder zur gezielten Ansprache und Gewinnung neuer Zielgruppen nutzen: Wann immer es darum geht, Menschen für die Bedeutung guten Hörens zu sensibilisieren oder auf die Gefahren schädlicher Hörbedingungen aufmerksam zu machen, ist die EarBox das ideale Instrument.



Mit der EarBox kann sich Ihre Kompetenz nicht nur sehen, sondern auch hören lassen.

Wenig Aufwand. Große Wirkung.

Mit der EarBox stehen Ihnen 5 Module zur Verfügung, die – einzeln oder aufeinander aufbauend – in nur wenigen Minuten schlüssige Ergebnisse präsentieren:

» Mit dem EarBox Hörcheck-Modul

geben Sie Ihren Kunden, Mitarbeitern oder Patienten ein unmittelbares Feedback über ihr ganz persönliches Hörvermögen.

» Der EarBox-Lautstärketest über Kopfhörer

bietet eine Vielzahl unterschiedlichster Musiktitel und zeigt Ihren Kunden den exakten Schalldruckpegel beim Hören in ihrer individuell bevorzugten Lautstärke an.

» Beim EarBox-Lautstärketest über Ohrhörer

erfolgt die Messung des Schalldruckpegels direkt am eigenen Smartphone und über den eigenen Ohrhörer Ihrer Testperson.

» Der EarBox Gehörschutzcheck

dient zur Demonstration und Überprüfung des persönlichen Im-Ohr-Gehörschutzes und zeigt an wie gut die Dämmwirkung des jeweiligen Gehörschutz-Stöpsels bzw. der Gehörschutz-Otoplastik tatsächlich ist.

» Mit dem EarBox-Modul Hörschadensimulation

können Sie – auch auf Basis der zuvor gemessenen Daten – eine künftig anzunehmende Hörbeeinträchtigung akustisch simulieren und damit selbst unbekümmerten Lautstärke-Fans eine nachhaltig beeindruckende Erfahrung vermitteln.



Fix gestartet.

Bereits bei der Inbetriebnahme zeigt die EarBox wie mobil und flexibel sie ist: Einfach die Software für EarBox und Soundkarte auf Ihrem PC, Ihrem Notebook oder Ihrem Tablet installieren und per USB-Kabel mit der EarBox verbinden. Schon können Sie loslegen – in Zukunft natürlich auch ohne weitere Software-Installation.

Die Anforderungen an Ihre Technik sind denkbar gering:

- » Intel Core 2 @ 1.6 GHz oder vergleichbar
- » 2 GB RAM
- » USB 2.0 Schnittstelle
- » Microsoft Windows 7 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit oder Windows 10 32/64 Bit

Alles Weitere ist im Lieferumfang der EarBox enthalten:

- » EarBox-Hörstation
- » Sennheiser-Kopfhörer HD6 MIX mit Anschlusskabel und Ersatzpolstern
- » USB-Kabel
- » CD-ROM zur Soundkarten-Treiber-Installation
- » Installations-CD mit Software und Handbuch im PDF-Format


Auch zahlreiche Musiktitel unterschiedlichster Genres sind in der EarBox bereits integriert. Eigene Titel oder Schallbeispiele können problemlos eingebunden werden.

Weitere Informationen zur EarBox erhalten Sie unter www.acousticon.de sowie direkt über Ihre kompetenten Ansprechpartner bei ciAD (für Software-Fragen) oder Acousticon (bei Fragen rund um die Hardware).

ciAD
competence in AudioDesign

ciAD AudioProducts GmbH
D-44287 Dortmund
Telefon +49 (0) 351 482 79 77
earbox@audioquality.de

acousticon

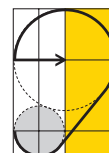

Acousticon Hörsysteme GmbH

Hirschbachstraße 48
D-64354 Reinheim
Telefon +49 (0) 61 62/93 24-0
Telefax +49 (0) 61 62/93 24-49
info@acousticon.de
www.acousticon.de